

# RESPONDER PELVIC BINDER

## INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE



### PRECAUȚII


Scoateți obiectele din buzunarele și îmbrăcămintea pacientului înainte de aplicare.

Monitorizați pielea pacientului pentru leziuni cauzate de presiune în timpul utilizării.

Dispozitivul este de unică folosință.


Reutilizarea dispozitivului poate provoca îmbolnăviri (de exemplu, infecție) sau răni (reducă performanță).

Aruncați dispozitivul folosit conform protocolului de risc biologic al unității de sănătate.

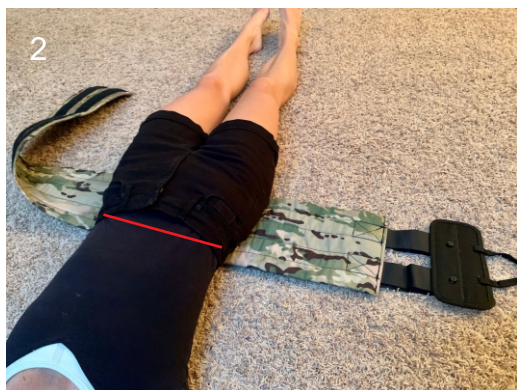

1.) Scoateți centura de imobilizare pelviana din punga de depozitare. Ciupiți și glisați urechea pentru a elibera partea de sus.

2.) Derulați și glisați centura de imobilizare pelviana sub pacientul în decubit dorsal. Centrați centura de imobilizare pelviana peste trohantere mari.

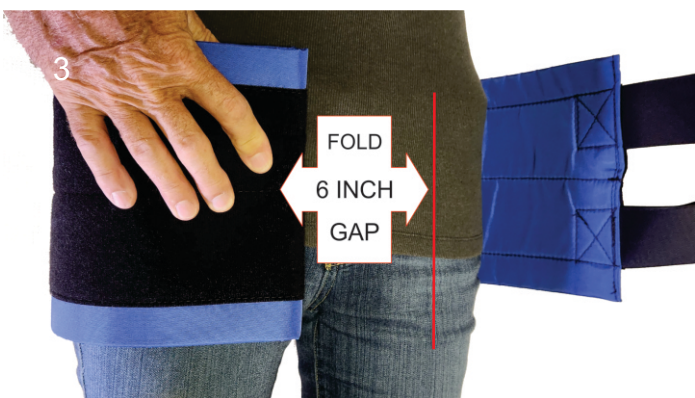

3.) Tăiați sau îndoiți capătul liber al centurii lăsând 10-13 cm între cele două margini.

4.) Trageți placa cu velcro peste pelvisul pacientului și puneți-o pe partea opusă. Apăsăți ușor pentru a cupla atașamentul cu velcro.



FareTec Inc Responder Products  
1610 West Jackson St #6  
Painesville OH 44077  
USA


[www.FareTec.com](http://www.FareTec.com)  
[www.ResponderProducts.com](http://www.ResponderProducts.com)

IF\_PBv.1\_ROM\_20250314

# RESPONDER PELVIC BINDER

## INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

5.) Strângeți prin tragerea ambelor curele în timp ce trageți mânerul plăcuței în direcția opusă, ca forță contrară; până când pacientul este stabilizat. Reglați individual ambele benzi velcro pentru a obține o reducere pelviană adaptată formei. Înfășurați benzile de velcro în jurul centurii.

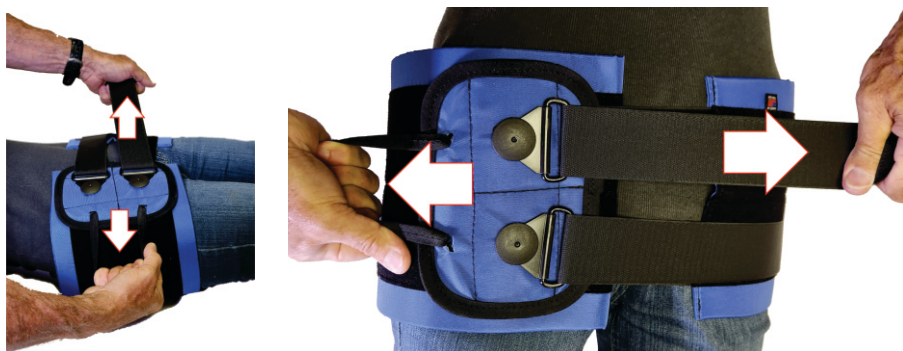

**UTILIZARE:** Responder Binder este o centură pelviană circumferențială neinvazivă, destinată stabilizării fracturilor pelvine în timpul transportului către o unitate de îngrijire definitivă.

Clapa de siguranță cu velcro

Vedere finală

Opțional: tăiați excesul de velcro care nu este utilizat.



### SPECIFICAȚII:

Pelvisul poate fi fixat cu o tensiune adecvată prin apăsarea pelvisului din circumferința exterioară la înălțimea trohanterului mare al feselor inferioare. Disponibil în negru, roșu, camo și albastru

**SAFE DISPOSAL:** The product should be disposed in the dedicated area as recommended by the local authorities.

**NOTICE:** Please report to FareTec or to the competent authority of the Member State in which you use this product any serious incident that has occurred and you suspect is in relation to this device. If you suspect a potential defect or a product has not met your expectations, please report this to the Company and provide as much information as possible. Company phone number: +1-440-350-9510



FareTec Inc, 1610 West Jackson St, Painesville, OH 44077 USA, (p) 440-350-9510  
(f) 440-350-9520, [www.faretec.com](http://www.faretec.com)



CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006  
Málaga-Spain



**INDICAȚII DE UTILIZARE:** Responder Binder este indicat pentru aplicare de către profesioniștii din prespitalice și medical sau personalul instruit, la persoanele care au sau sunt suspectate că au o fractură de inel pelvin unde ar putea apărea hemoragie.

**CONTRAINDICAȚII:** Nu utilizați Responder Binder dacă reperele anatomice sunt absente.

|                                                                                     |                              |                                                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Manufacturer                 |  | Authorized representative in the European Community |
|  | Medical Device               |  | Importer                                            |
|  | Consult instructions for use |  | Catalogue number                                    |
|  | Date of manufacture          |  | Batch code                                          |